

Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test är ett snabbtest som hjälper vårdgivare att identifiera individer med misstänkt, aktiv Covid-19 infektion, inom de första sju dagarna efter symptom.



Fast



Easy to Use



Accurate

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test är ett lateralt flödeskromatografiskt immunanalys för kvalitativ detektion av nukleokapsiden proteinantigen från SARS-CoV-2 i näspinprover direkt från individer som misstänks för en aktiv COVID-19-infektion av deras vårdgivare inom de första sju dagarna efter symtomens början.

- Prover från näs-svabb / näspinne
- Resultat efter 15 minuter
- Utmärkt prestanda jämfört med molekylära metoder
- Förvaring i rumstemperatur

Klinisk prestanda

Prestandan för Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test fastställdes med 304 nasala pinnprover som samlats in från enskilda symptomatiska patienter. (inom 7 dagar efter uppkomsten) som misstänktes för COVID-19. Prestanda för Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test jämfördes med en RT-PCR-metod.

Klinisk prestanda - Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test


Metod	Resultat	RT-PCR		Totalt resultat
		Negativt	Positivt	
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	Negativt	269	1	270
	Positivt	1	33	34
Totalt resultat		270	34	304
PPA: 97.1% (83.8% - 99.9%)*		NPA: 99.6% (97.7% - 99.9%)*		OPA: 99.3% (97.5% - 99.9%)*

PPA-positivt procentöverenskommelse; NPA - Negativt procentavtal; OPA - Övergripande procentöverenskommelse, * 95% konfidensintervall

Material som medföljer

- Testkassetter • Snabbguide • Extraktionsbuffert • Extraheringsbuffertrör • Negativ kontrollpinne • Positiv kontrollpinne • Näspinnar • Bipacksedel

Procedur och avläsning

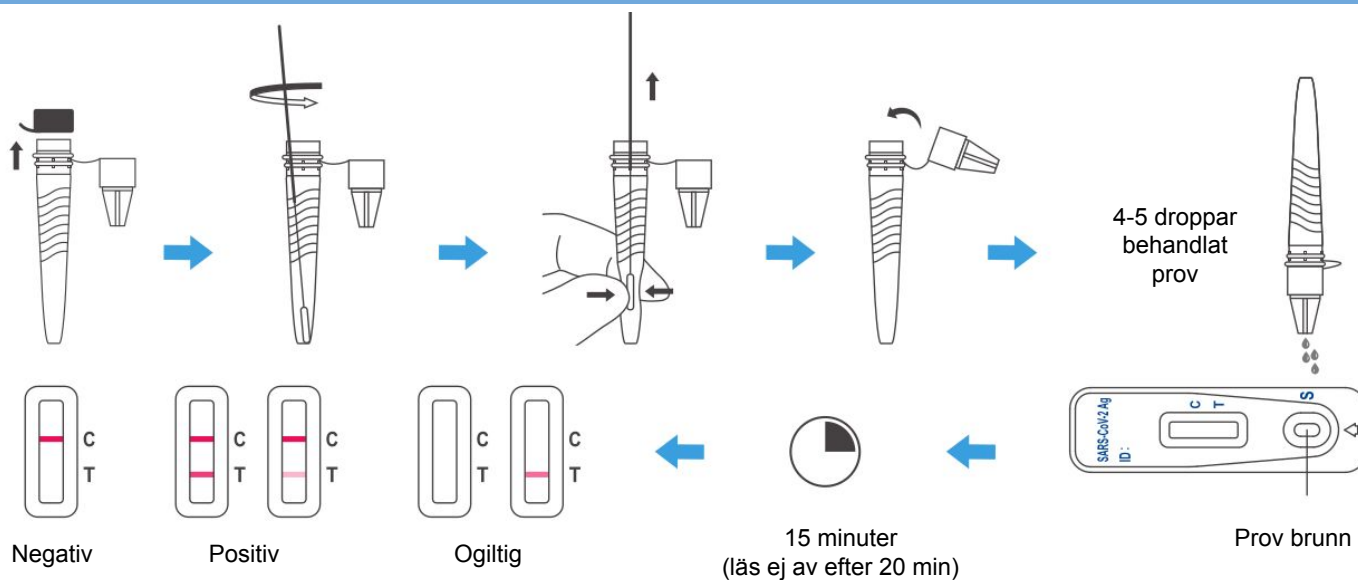

Beställningsinformation

Produktnamn	Katalognr	Format	Prov	Förpackning
Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	ZAF-145-11	Kassett	Näspinne	25 Test-kit



Zafena AB
Norrbygatan 1, 59176 Borensberg
order@zafena.se